




TAURUS WELLNESS

Bedienungsanleitung

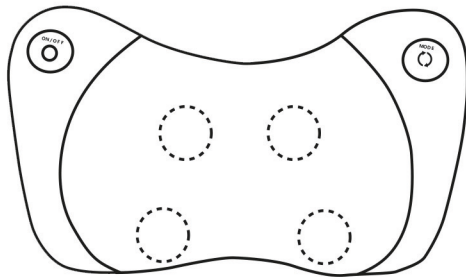

Art.-Nr. TW-PILL

TWPILL.01.01

1.1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1.2 Persönliche Sicherheit

⚠️ WARNUNG

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob die Verwendung für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem:
 - + Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Geräten, die elektromagnetische Interferenzen auslösen können.
 - + Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
 - + Schwangere, erkrankte Personen oder Personen in einer schlechten physischen Verfassung.
 - + Personen, denen aufgrund von Vorerkrankungen (z. B. Gefäßerkrankungen oder Dermatitis) von Massagen abgeraten wird.
 - + Personen, die an Osteoporose, einem Wirbelbruch oder anderen akuten Krankheiten leiden.
 - + Personen mit einer irregulären Verkrümmung der Wirbelsäule.
 - + Personen, die an einer Wahrnehmungsstörung aufgrund einer peripheren Durchblutungsstörung (z. B. Diabetes) leiden.
- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer Decke oder einem Kissen. Eine Überhitzung des Gerätes und dadurch entstehende Stromschläge, Brände und/oder Personenschäden können die Folge sein.
- + Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen in denen aerosol Sprays oder Sauerstoff verabreicht werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Verwenden Sie das Gerät nicht an geschwollenen und/oder entzündeten Körperteilen oder an gereizten Hautregionen.
- + Verwenden Sie das Gerät nicht an schmerzenden Körperregionen bei denen die Ursache des Schmerzes nicht geklärt ist.
- + Sollten Sie während der Nutzung ungewöhnliche Beschwerden verspüren, schalten Sie das Gerät aus und verwenden Sie es nicht weiter. Kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- + Verwenden Sie bei der ersten Benutzung ein leichtes Massageprogramm. Vermeiden Sie Massage-Einheiten von mehr als 15 Minuten und massieren Sie keine Körperstelle für mehr als 5 Minuten am Stück. Übermäßige Massagen können zur Überreizung der Muskeln und Nerven führen und Verletzungen nach sich ziehen.

⚠️ VORSICHT

- + Verwenden Sie das Gerät nur in einer entspannten Position. Üben Sie keinen punktuellen Druck auf bestimmte Körperregionen aus.
- + Bei diesem Gerät handelt es sich nicht um ein medizinisches Gerät. Dieses Gerät sollte nie eine medizinische Behandlung ersetzen.

▶️ ACHTUNG

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.
- + Platzieren Sie keinerlei schwere Gegenstände auf dem Gerät.

1.3 Elektrische Sicherheit

⚠️ GEFAHR

- + Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie nach Beendigung der Massage, sowie vor der Wartung bzw. Reinigung den Stecker des Gerätes aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei nicht am Kabel.
- + Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie zuvor mit Wasser in Berührung gekommen sind und/oder sich in einer feuchten Umgebung befinden.

⚠️ WARNUNG

- + Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange der Netzstecker in der Wandsteckdose eingesteckt ist. Während Ihrer Abwesenheit ist der Netzstecker aus der Steckdose zu entfernen, damit ein unsachgemäßer Gebrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht genutzt werden.

▶️ ACHTUNG

- + Das Gerät benötigt einen Netzanschluss von 220-230 V mit 50 Hz Netzspannung.
- + Das Gerät darf nur mittels des mitgelieferten Netzkabels direkt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Verlängerungskabel müssen den VDE-Richtlinien entsprechen. Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- + Die Steckdose muss mit einer Sicherung mit einem Mindestsicherungswert „16 A, träge“ gesichert sein.
- + Verändern Sie weder etwas am Netzkabel, noch am Netzstecker.
- + Das Gerät sowie sein Netzkabel ist von Wasser, Hitze, Öl und scharfen Kanten fernzuhalten. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät oder unter einem Teppich entlanglaufen und stellen Sie keine Gegenstände darauf.
- + Entfernen Sie den Netzstecker nicht bevor das Gerät ausgeschaltet wurde.

1.4 Verwendungsort

⚠️ WARNUNG

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.
- + Um Brände zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder in Räumen mit hoher Hitze auf (z. B. nahe einer Heizung).

⚠️ VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass um das Gerät ausreichend Freiraum bestehen bleibt. Beachten Sie, dass das Gerät in der Liegeposition ausreichend Freiraum nach hinten benötigt.


▶️ ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um ein Ausbleichen oder einen schnelleren Verschleiß des Bezugs zu vermeiden, verzichten Sie darauf das Gerät an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und/oder hoher Hitze aufzustellen.

Massage Pillow

Technische Daten

Nennspannung:	DC 12V 2A
Leistung:	24 W
Massagedauer:	20 Minuten
Artikelgewicht (inkl. Verpackung):	1,8 kg
Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung):	1,4 kg
Verpackungsmaße (L x B x H):	ca. 33 cm x 16 cm x 22,5 cm
Produktmaße (L x B x H):	ca. 32 cm x 15 cm x 21,5 cm

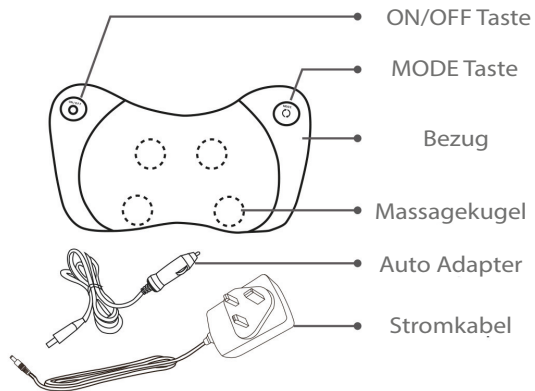

Bedienung

1. Schließen Sie das Stromkabel an das Gerät.

ⓘ HINWEIS

Wenn Sie das Nadelpad verwenden wollen, platzieren Sie es jetzt auf das Massagekissen und fixieren Sie es mit dem Klettverschluss.

2. Um die Massage und Wärmefunktion zu beginnen, drücken Sie auf die ON/OFF Taste.
3. Um die Wärmefunktion auszuschalten, drücken Sie erneut auf die ON/OFF Taste.
4. Um die Massagerichtung zu ändern, drücken Sie auf die MODE Taste.
5. Um die Massage vor Ablauf der vorprogrammierten 20 Minuten zu beenden, halten Sie die ON/OFF Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt.

ⓘ HINWEIS

Das Gerät schaltet sich automatisch nach 20 Minuten aus.

Pflege, Wartung und Lagerung

⚠ WARNUNG

Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenem weichen Tuch.
2. Lagern Sie das Gerät in dem mitgelieferten Karton in einer trockenen Umgebung

Garantiehinweise

Trainingsgeräte von Taurus® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite zu Ihrem Taurus®-Gerät.

Kontakt

DE Technik

☎ +49 4621 4210-900

✉ technik@sport-tiedje.de

Service

☎ 0800 20 20 277

(kostenlos)

✉ info@sport-tiedje.de

UK Technik

☎ +44 141 876 3986

✉ support@powerhousefitness.co.uk

Service

☎ +44 141 876 3972

FR Technik & Service

☎ +33 (0) 172 770033

+49 4621 4210-933

✉ service-france@fitshop.fr

DK Technik & Service

☎ 80 90 16 50

+49 4621 4210-945

✉ info@fitshop.dk

INT Technik & Service

☎ +49 4621 4210-944

✉ service-int@sport-tiedje.de

BE Technik & Service

☎ 02 732 46 77

+49 4621 42 10-932

✉ info@fitshop.be

NL Technik & Service

☎ +31 172 619961

✉ info@fitshop.nl

AT Technik & Service

☎ 0800 20 20 277

(kostenlos)

+49 4621 42 10-0

✉ info@sport-tiedje.at

CH Technik & Service

☎ 0800 202 027

+49 4621 42 10-0

✉ info@sport-tiedje.ch

PL Technik & Service

☎ 22 307 43 21

+49 4621 42 10-948

✉ info@fitshop.pl